

# SENCOR®

SOI 1100SL / SOI 1101RD  
SOI 1102TQ / SOI 1210BL  
SOI 1211GD



## ÚSTNÍ SPRCHA



Návod k použití v originálním jazyce



**SENCOR®**

**SOI 1100SL / SOI 1101RD  
SOI 1102TQ / SOI 1210BL  
SOI 1211GD**

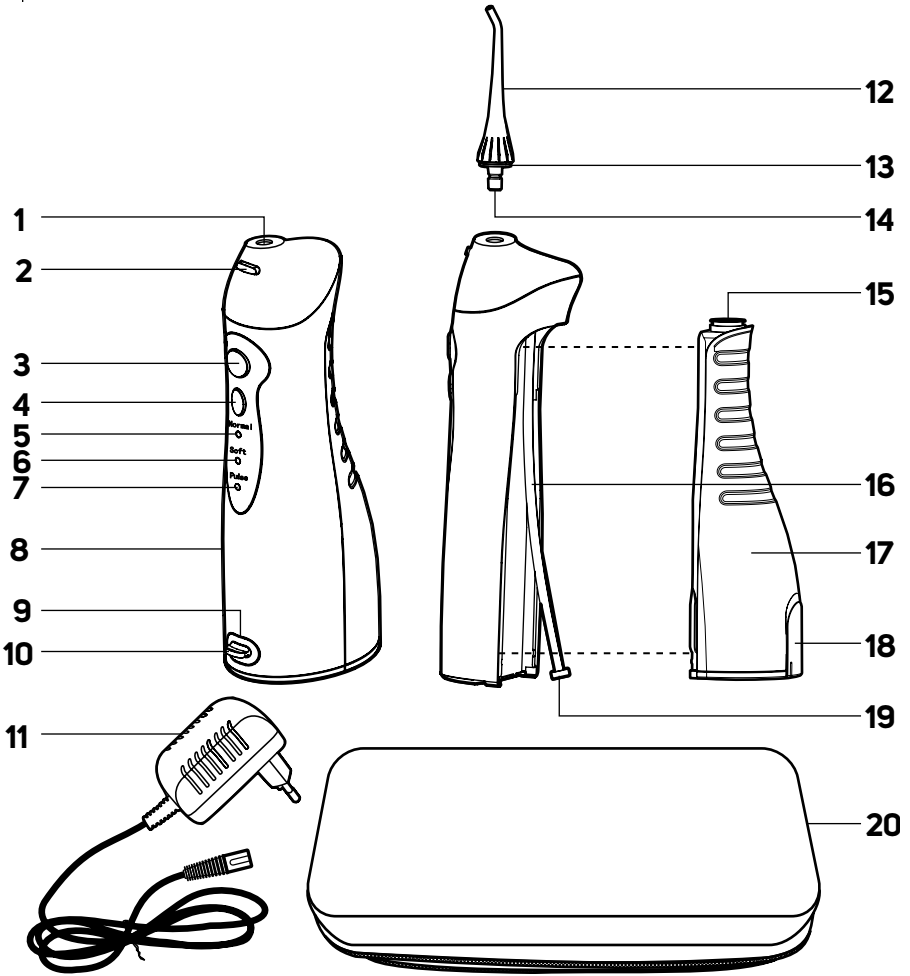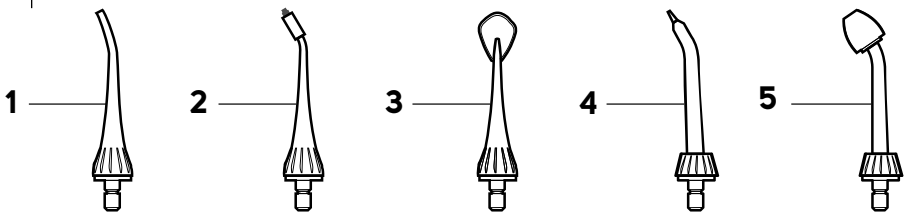

**A****B**

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Ústní sprchy mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Ústní sprchy se musí používat pouze se studenou nebo teplou vodou nebo se zvláštními roztoky definovanými v tomto návodu.
- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.



#### **Upozornění:**

Spotřebič se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

# • Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.

## Elektrická bezpečnost

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřkýma rukama.
- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který lze vyměnit pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat a vyměnit za nový svépomocí.



### Výstraha:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmout akumulátor. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud byl spotřebič připojen přes adaptér k síti a spadne i s přívodním kabelem do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo kontaktujte dodavatele spotřebiče se žádostí o nový adaptér.

## Bezpečnost při používání

- Tato ústní sprcha je určena výhradně k čištění zubů a ústní hygieně osob. Ústní sprcha není určena ke komerčním účelům nebo k čištění zubů zvířat.
- Ústní sprchu a jednotlivé nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Pokud jste v nedávné době podstoupili intenzivní zákrok jako například operaci zubů či dásní, trpěli dlouhodobými potížemi se zuby nebo pokud máte podezření na problémy zubního charakteru (plomby, korunky atd.), poraďte se před použitím ústní sprchy se svým zubním lékařem.
- Pokud po použití ústní sprchy dochází ke krvácení dásní nebo pokud krvácení neustává po 2 týdnech používání, obraťte se na svého zubního lékaře.
- Máte-li jakékoliv zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím ústní sprchy na svého zubního lékaře.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození ústní sprchy (rukojeť nebo síťový adaptér), přestaňte ji používat.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s touto ústní sprchou. Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které jsou dodány výrobcem.
- Ústní sprcha a její síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Ústní sprchu nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Ústní sprchu a její příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Ústní sprchu a její příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.



### Výstraha:

Ústní sprchu udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že ústní sprcha a nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte ústní sprchu s poškozeným nástavcem.
- Zří použití nebo při dobíjení může docházet k mírnému zahřívání ústní sprchy. To je zcela normální jev.
- Na konec nástavce s tryskou přilíhš netlačte.
- Abyste předešli zranění, neplňte nádržku horkou vodou. Do nádržky nevkládejte žádné předměty.
- Tryskou nástavce nemiňte pod jazyk, do ucha, nosu, očí nebo dalších citlivých oblastí, mohlo by dojít ke zranění.
- Nečistěte nástavce s tryskou, rukojeť, síťový adaptér nebo nádržku na vodu v myčce nebo mikrovlnné troubě.
- Ústní sprchu vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Ústní sprchu a její síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Ústní sprchu udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na ústní sprše neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí sprchy popsané v kapitole Čištění a údržba.

- Nepoužívejte ústní sprchu, pokud upadla na zem, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozena.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, ústní sprchu ani její příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

# CZ Ústní sprcha

## Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ dalšího použití. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS ÚSTNÍ SPRCHY A JEJÍHO PŘISLUŠENSTVÍ

<b>A1</b> Otvor pro nástavec	<b>A11</b> Síťový adaptér
<b>A2</b> Tlačítko pro uvolnění nástavce s tryskou	<b>A12</b> Nástavec s tryskou
<b>A3</b> Spouštěcí a vypínací tlačítko	<b>A13</b> Označující kroužek
<b>A4</b> Přepínač režimů	<b>A14</b> Upevňovací čep pro nástavec
<b>A5</b> Indikátor režimu Normal	<b>A15</b> Horní plnicí otvor nádrčky
<b>A6</b> Indikátor režimu Soft	<b>A16</b> Sací trubička
<b>A7</b> Indikátor režimu Pulse/indikátor nabíjení	<b>A17</b> Nádrčka na vodu o objemu 150 ml
<b>A8</b> Rukojeť	<b>A18</b> Kryt dolního plnicího otvoru nádrčky
<b>A9</b> Nabíjecí zdířka	<b>A19</b> Filtr sací trubičky
<b>A10</b> Krytka nabíjecí zdířka	<b>A20</b> Cestovní pouzdro

<b>B1</b> Standardní nástavec Vhodný pro běžné čištění, odstraňování bakterií mezi zuby a ve spoji mezi zubem a dásní.	<b>B3</b> Nástavec pro čištění jazyku Vhodný pro čištění jazyku a tváří, odstraňování bakterií, zbytků jídla a odumřelých buněk z povrchu.
<b>B2</b> Ortodontický nástavec Vhodný pro čištění při nošení rovnátek nebo obtížně přístupných míst na mstku.	<b>B4</b> Nástavec pro čištění prohlubni Vhodný pro čištění hůře dostupných nebo citlivých míst.
	<b>B5</b> Nástavec pro čištění nosní dutiny Vhodný pro čištění nosní dutiny od prachu, pylu atd.

### ÚČEL POUŽITÍ

- Ústní sprcha je určena výhradně k ústní hygieně. Napomáhá k odstranění bakterií z mezizubních prostor a záhřbů dásně v okolí zubů, odstraňuje rychle a šetrně zbytky jídla z mezizubních prostor, a současně efektivně masíruje Vaše dásně. V kombinaci s pečlivým čištěním zubů Vám pomáhá aktivně pečovat o zdraví Vašich zubů. Ústní sprcha je určena k používání v domácnostech, není určena pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Opláchněte všechny nástavce **B1** až **B5** pod tekoucí vodou.
- Vypláchněte několikrát nádrčku na vodu **A17** nad umyvadlem a naplňte ji čistou vodou dle kapitol. Naplnění nádrčky na vodu. Zasuňte nástavec **B1** do ústní sprchy dle kapitoly Připravení a vyjmutí nástavců. Nasměrujte trysku nástavce do umyvadla a zapněte ústní sprchu tlačítkem **A3**. Přepínačem režimů **A4** zvolte režim Normal a nechejte vodu chvíli proudit přes trysku, abyste propláchnuli jak sací trubičku **A16**, tak trysku nástavce. Stejný postup použijte i pro nástavce **B2** až **B5**.

### NABÍJENÍ ÚSTNÍ SPRCHY

- Ústní sprcha je vybavena vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezzáhřový provoz ústní sprchy. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte akumulátor ústní sprchy nejprve plně nabít. Nabítí akumulátoru do plného stavu trvá přibližně 8 hodin. K nabíjení ústní sprchy používejte pouze originální síťový adaptér **A11**.



#### Varování:

V okolí nabíjecí zdířky **A9** nebo jejího krytu **A10** nesmí být žádná vlhkost. Proto před zapojením síťového adaptéru doporučujeme otřít rukojeť **A8** dosucha.

- Tahem vyjměte krytku nabíjecí zdířky **A10** a do zdířky **A9** zapojte konektor síťového adaptéru **A11**. Vidlici síťového adaptéru **A11** připojte k síťové zásuvce. Nabíjení je indikováno blikáním indikátoru **A7**.



#### Poznámka:

Během nabíjení je blokováno použití ústní sprchy a netze ji spustit.

- Jakmile je akumulátor plně nabit, indikátor **A7** trvale svítí. Nejprve vytáhněte vidlici síťového adaptéru **A11** ze síťové zásuvky a teprve poté odpojte konektor síťového adaptéru od zdířky **A10**. Zasuňte zpět krytku nabíjecí zdířky **A10**.



#### Upozornění:

Ústní sprchu nenechávejte připojenou k vnějšmu zdroji energie déle, než je potřeba k jejímu úplnému nabíjení.

- Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 56 minut provozu nebo 2 týdny provozu při dvou čistění denně. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdelší životnosti akumulátoru:
  - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, ústní sprchu nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
  - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
  - Pokud ústní sprchu nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

### NAPLNĚNÍ NÁDRČKY NA VODU

- Nádrčku na vodu **A17** můžete naplnit, aniž byste ji museli odebrat z rukojeti **A8**. Vyjmutou ústní sprchu podržte vodorovně. Otevřete kryt dolního plnicího otvoru **A18**, nádrčku naplňte vodou a kryt řádně uzavřete. Pečlivě otřete jakoukoliv rozlitou vodu.



#### Tip:

K plnění nádrčky na vodu **A17** můžete kromě čisté vody použít také ústní vodu nebo její roztok. Užití ústní vody činí používání ústní sprchy ještě účinnější. Nepoužívejte ale ústní vody obsahující izopropylmyristát nebo vysokou koncentraci esenciálních olejů. Tyto látky jsou zahrnuty v ústních vodách, prodáváných ve skleněných a keramických nádobách a mohly by poškodit nádrčku na vodu **A17** i vnitřní části ústní sprchy. Ústní vody, které obsahují látky neškodné pro ústní sprchu, jsou prodávány v plastových nádobách.

**Upozornění:**

Voda by měla mít příjemnou teplotu. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.

- Nádržku na vodu **A17** je také možné naplnit mimo ústní sprchu. Jednou rukou uchopíte rukojeť **A8**, druhou rukou uchopíte nádržku na vodu **A17** a tahem směrem dolů ji vysuňte ven z drážek uvnitř rukojeti **A8**. Dbejte na to, abyste nepoškodili sací trubičku **A16**. Naplňte nádržku **A17** vodou přes horní plnicí otvor **A15**. Nepřepěňujte. Pečlivě otevřete jakoukoliv rozlitou vodu. Před zpětným zasunutím nádržky **A17** do rukojeti **A8** nejprve vložte do nádržky **A17** sací trubičku **A16** a teprve potom zasuněte nádržku **A17** zpět do drážek uvnitř rukojeti **A8**.

**PŘÍPEVNĚNÍ A VYJMUTÍ NÁSTAVCE**

- Nástavce s tryskou **B1** až **B5** jsou dodány s různobarevnými kroužky **A13** a lze je tak rozlišit pro další osoby, např. členy rodiny.
- Zvolte požadovaný nástavec a jeho čep **A14** zasuňte shora kolmo do otvoru **A1** v rukojeti sprchy **A8**. Rukojeť **A8** přitom držte tak, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka **A3**.
- Pro vyjmutí nástavce stiskněte a držte tlačítko **A2** a nástavec vyjměte kolmo vzhůru z otvoru **A1**.

**POUŽITÍ ÚSTNÍ SPRCHY**

- Než začnete ústní sprchu používat, seznámte se s veškerými pokyny k použití.
- Naplňte nádržku **A17** čerstvou vodou.
- Zvolte vhodný typ nástavce a připevněte jej k ústní sprše. Před každým použitím se přesvědčte, že nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte ústní sprchu s poškozeným nástavcem.
- Mačkejte přepínač režimů **A4**, dokud se nerozsvítí indikátor požadovaného režimu:
  - indikátor **A5**, režim Normal: Normální proud vody, vhodný pro běžné čištění.
  - indikátor **A6**, režim Soft: Mírný proud vody, vhodný pro jemné čištění citlivých dásní.
  - indikátor **A7**, režim Pulse: Čištění dásní s masáží.

**Poznámka:**

Režim lze měnit i v průběhu oškrábání.

- Vsuňte nástavec do pootevřených úst a nahněte se nad umyvadlo, aby mohly voda a vypláchnuté zbytky pokrmů vytéct ven.
- Zapněte ústní sprchu spouštěcím tlačítkem **A3**. Nasměrujte proud vody na místo, které chcete oškrábat, tedy na mezizubní prostory, okraje zubů nebo na dásně.

**Tip:**

Vroubkovaná dolní část každého nástavce s tryskou umožňuje otáčení nástavce o 360° dokola a tím poskytuje snadný přístup do všech částí úst.

- Pohybujte tryskou nástavce pomalu z jednoho mezizubního prostoru ke druhému. Tímto způsobem vyčistíte všechny vnější i vnitřní strany.
- Důkladně oškrákejte i okolí rovnátek, korunek a můstků.
- Při masírování dásní mírte tryskou kolmo na dásně a oškrákejte i linii dásní.
- Jakmile z trysky nevychází žádná voda, je nádržka na vodu **A17** prázdná. Ústní sprchu vyjměte tlačítkem **A3** a doplňte vodu do nádržky. Při opětovném zapnutí se ústní sprcha automaticky spustí v naposledy zvoleném režimu.

**Upozornění:**

Pokud během provozu ústní sprchy začne blikat indikátor **A7**, znamená to, že je akumulátor téměř vybitý a je nutno jej nabít dle kapitoly Nabíjení ústní sprchy.

- Pro vypnutí ústní sprchy stiskněte tlačítko **A3**. Nástavec s tryskou vyjměte z úst, až když je ústní sprcha vypnutá.

**Poznámka:**

Ústní sprcha je vybavena časovým spínačem, který ji automaticky vypne po dvou minutách činnosti, takže nemusíte hlídat, jak dlouho si již ústa čistíte.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA****Upozornění:**

K čištění ústní sprchy používejte vodu o teplotě do 50 °C nebo neutrální čisticí prostředek. K čištění nepoužívejte drátěnky, ředidla nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod., aby nedošlo k poškození čistěcího povrchu. Při čištění neponořujte ústní sprchu do vody.

**NÁDRŽKA NA VODU**

- Po každém použití zcela vyprázdněte nádržku na vodu **A17**, aby se v ní nemohly množit bakterie. Nádržku omyjte vodou, otevřete ji čistým suchým hadříkem a nechte ji odkapat a vysušit.
- Pokud jste při použití ústní sprchy nalili do nádržky **A17** ústní vodu nebo její roztok, je nutno nádržku řádně vypláchnout. Doporučujeme naplnit nádržku **A17** čistou vodou, spustit chod ústní sprchy a veškerý obsah nádržky nechat vyčerpat do umyvadla. Nádržku pak omyjte vodou, otevřete ji čistým suchým hadříkem a nechte ji odkapat a vysušit.

**RUKOJEŤ**

- Rukojeť **A8** otevřete čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehké navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytřete dosucha. Prostor pro uložení nádržky na vodu včetně sací hadičky **A16** vždy otevřete do sucha. Sací trubičku **A16** neohýbejte, netahujte za ni ani ji nekrutěte!

**Upozornění:**

Rukojeť **A8** není určena pro omývání pod vodovodním kohoutkem. Ústní sprchu ani její síťový adaptér **A11** nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

**NÁSTAVCE**

- Po každém použití vypláchněte využitý nástavec vodou, abyste zamezili tvorbě usazenin. Následně omyjte povrch nástavce vodou a pak jej měkkou utěrkou vždy otřete do sucha. Z hygienických důvodů doporučujeme každých šest měsíců vyměnit používaný nástavec za nový.

**SKLADOVÁNÍ**

- Po ukončení používání připravte ústní sprchu dle pokynu v kapitole Čištění a údržba. Ústní sprchu skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření. Pokud chcete ústní sprchu odložit na delší dobu, doporučujeme nádržku na vodu **A17** vyjmout z rukojeti **A8**.



## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Ústní sprcha po vybalení nefunguje.	Ústní sprcha byla uložena ve skladu a nebyla používána déle než 3 měsíce.	Nechte ji alespoň 8 hodin nabíjet.
Ústní sprcha i po dobití funguje jen několik minut.	Končí životnost baterie.	Kontaktujte servisní středisko výrobce nebo prodejce.
	Doba nabíjení nebyla dostatečná.	Nechte sprchu nabíjet alespoň 8 hodin.
Tlak vody je velmi nízký.	Tryska je zanesená nečistotami.	Vyčistěte nebo vyměňte trysku.
	Tryska je zdeformovaná.	Vyměňte trysku.
	Filtr sací trubičky je zanesený nečistotami.	Vyčistěte filtr.
Z ústní sprchy nestříká voda.	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte vodu
	Sprcha je při použití příliš nakloněná.	Držte sprchu co nejvíce ve svislé poloze.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Ústní sprcha

Rozměry včetně nástavce (výška x hloubka x šířka) ... 275 x 73 x 56 mm  
Hmotnost včetně nástavce ..... 265 g  
Objem nádržky ..... 150 ml  
Frekvence čerpadla ..... 1 400 pulzů/min  
Tlak vody ..... 275 – 620 kPa  
Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody ..... IPX7

### Vestavěný akumulátor

Typ ..... Li-ion, 5 V / 0,6 A

### Sítový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí ..... 100–240 V AC  
Jmenovitý kmitočet ..... 50–60 Hz  
Výstup ..... 5 V DC/0,6 A

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

### Stupeň krytí před škodlivým vniknutím vody:

**IPX7** – Zařízení je chráněno proti škodlivému vniknutí vody při ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Pozor, následující postup je nevratný! Před vyjmutím akumulátoru odpojte ústní sprchu od síťového adaptéru a nechejte ji zcela vybit. Vysuňte nádržku na vodu **A17**. Pomocí vhodného nástroje odstraňte dvě gumové opěrky na spodní straně rukojeti **A8** a odšroubujte dva přípevňovací šroubky. Vedle sací hadičky **A16**, v horní části rukojeti, odšroubujte další dva šroubky. Tím uvolníte kryt a získáte přístup do vnitřní části ústní sprchy. Odpojte nebo odstříhnete vodiče akumulátoru a akumulátor vyjměte. Vyjmutí akumulátoru může rovněž zajistit autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odlozte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

