


návod k použití

Mini masážní přístroj

typ: MGPC-101MM

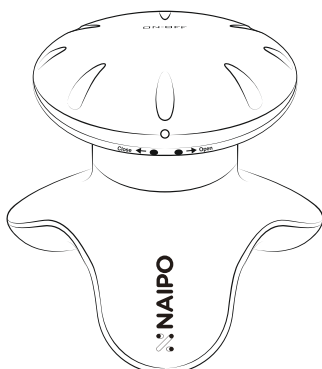

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní přístroj firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit.

Balení obsahuje

- 1 x vibrační masážní přístroj
- 3 x baterie typu AAA (mikrotužkové)
- 1 x návod k použití


Technické údaje

Typ	mini masážní přístroj Naipo
hmotnost	≈0,26 kg
rozměry	11,2 x 10,3 x 9,3 cm
materiál	ABS, pryskyřice
napájení	stejnoseměrné 4,5 V, 3 x baterie AAA
spotřeba energie	1,3 VA
intenzita masáže	nízká
voděodolnost	stupeň ochrany IP44

Návod k používání přístroje

Vložení baterií

- Otevřete kryt přístroje a vložte 3 mikrotužkové (AAA) baterie s polaritou podle následujícího schématu:

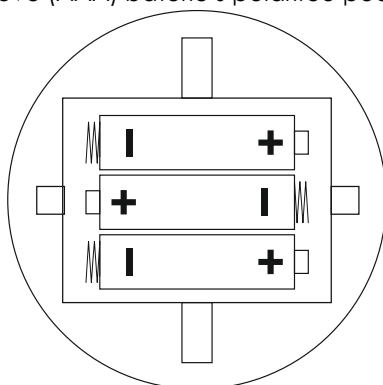

- Potvrďte správnou orientaci kladného a záporného pólu baterií a řádně zajistěte kryt prostoru pro baterie.

Ovládání

- Umístěte 3 masážní ramena na část těla, kterou chcete masírovat a přitiskněte dolů horní část masážního přístroje.
- Masážní přístroj bude vibrovat tak dlouho, dokud budete dostatečně tlačit na horní část zařízení.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie jsou slabé nebo jsou vloženy s nesprávnou polaritou.	Vyměňte baterie nebo ověřte, že jsou správně vloženy.
Vibrace jsou nezvykle slabé.	Slabé baterie.	Vyměňte baterie.

Údržba

Povrch masážního přístroje navlhčete měkkým hadrem s alkoholem a setřete.

Po použití uchovávejte masážní přístroj na bezpečném místě.

Na horní část masážního přístroje nic nepokládejte.

Nerozebírejte.

Přeprava a skladování

Teplota prostředí: 15 °C – 35 °C

Maximální relativní vlhkost: 75 %

Větraná místnost bez agresivních plynů

Atmosférický tlak: 860 – 1060 mbar

Masážní přístroj je lehce odolný proti nárazům, vhodný pro přepravu letadlem, železnicí, po silnici či lodí.

Neponořujte do tekutin a nevystavujte nárazům.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně

IP44
Made in China



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz