


návod k použití

Masážní polštář Shiatsu s vyhříváním pro záda a krk

typ: MGP-129M

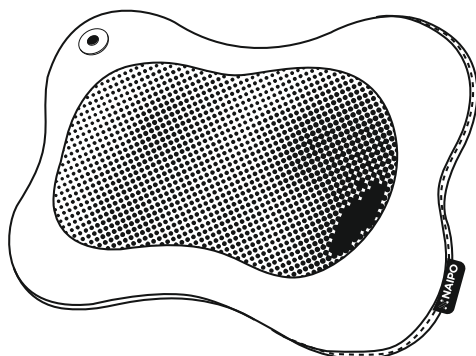

Důležité bezpečnostní pokyny

Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

Varování

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

01. Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
02. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
03. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
04. Nikdy nepracujte s přístrojem, má-li blokován přístup vzduchu. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů apod.
05. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty.
06. Nepoužívejte venku.
07. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
08. Odpojení provedte tak, že nejprve vypnete všechny funkční prvky a pak přístroj odpojíte od elektrické zásuvky.
09. Je-li přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, invalidy či postiženými osobami, je nezbytný stálý dohled nad činností přístroje, aby nedošlo k jeho nesprávnému použití.
10. Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám. Nepoužívejte nad citlivými částmi pokožky nebo nad místy se špatným krevním oběhem.
11. Tento přístroj má vyhřívání povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při použití přístroje opatrné.
12. Přístroj musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
13. Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
14. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
15. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.
16. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.
17. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.



Zařízení není určeno ke komerčnímu využití ani k lékařským účelům. Máte-li obavy o své zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.



Používejte výhradně ve vnitřních prostorách!



Nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech (jako jsou koupelny nebo sprchy).




- Nemyjte!
- Nečistěte chemicky!
- Po použití výrobku po dobu 20 minut si 30 minut odpočiňte, pak můžete přístroj použít znovu.

Oblasti masáže



Schéma přístroje

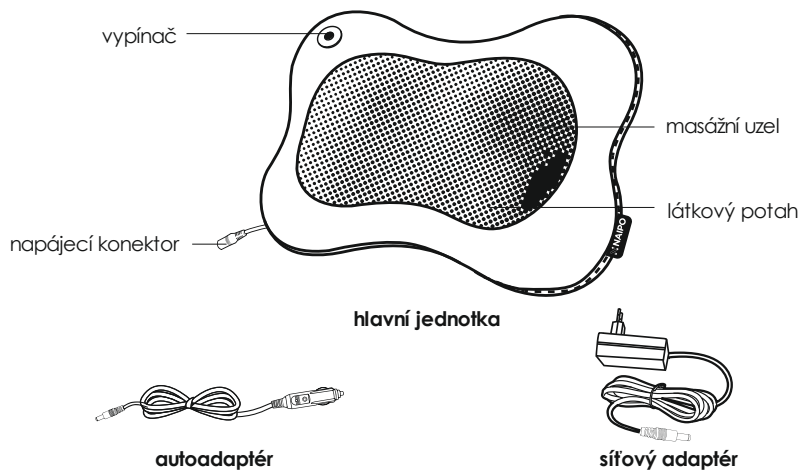

Návod k používání přístroje

1. Připojte přístroj ke zdroji napájení.
 2. Stiskněte vypínač a přístroj zapněte. Aktivuje se valivá masáž a vyhřívání.
 3. Dalším stiskem vypínače vyhřívání vypnete.
 4. Dlouhým stiskem vypínače na dobu delší než 3 sekundy vypnete všechny funkce.
- Po použití přístroj odpojte od zdroje napájení.

Údržba výrobku

1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Čistěte suchým hadrem.
2. Výrobek udržujte v čistotě a neskladujte jej ve vlhkém prostředí.

Pozor

Výrobek nesmí být čištěn benzenem, ředidlem, ani jinými agresivními prostředky – došlo by ke změně barvy.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně

