


## návod k použití Masážní přístroj na chodidla MGF-836

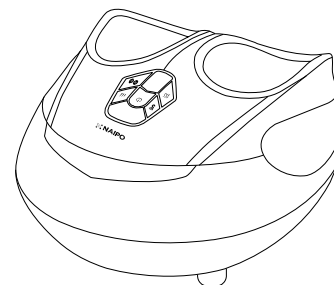

### Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro masážní přístroj na nohy se zahříváním a masáží vzduchovými polštáři firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

### Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj nohou
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér

### Technické údaje

Název: Masážní přístroj se zahříváním a masáží vzduchovými polštáři Naipo

Model: MGF-836

Napájení: 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz



Spotřeba: 36 W

Výchozí časovač: 15 minut

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí, ani v prostředí s vysokou teplotou; hrozí jeho poškození.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou koncentrací benzínu, ředidel, alkoholu či žíravin, jako jsou bělidla, aby nedošlo ke změně barevnosti výrobku, k jeho deformaci, popraskání a závadě.
- Nesedějte na přístroj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Přístroj by neměli používat děti, těhotné ženy, starší lidé a lidé s příznaky osteoporózy.
- Přístroj používejte výhradně s dodávaným adaptérem.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (například v koupelně), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či k jiným bezpečnostním problémům.
- Přístroj přestaňte používat, jakmile pocítíte neobvyklou nebo palčivou bolest; pak se neprodleně obraťte na odbornou opravnu.
- Bude-li poškozený kryt výrobku či napájecí kabel, přístroj nepoužívejte.
- Doporučujeme přístroj nepoužívat nepřetržitě déle než 15 minut. Nadměrné používání přístroje může způsobit bolest svalů či nervů.
- Před použitím přístroje nebo během jeho používání neaplikujte léčivé/kosmetické krémy či emulze na tělo přístroje nebo na chodidla.
- Nepoužívejte přístroj, má-li poškozená nožní pouzdra nebo napájecí kabel.
- Pokud se do přístroje dostane voda, nepoužívejte jej.

## Schéma přístroje a ovládací panel

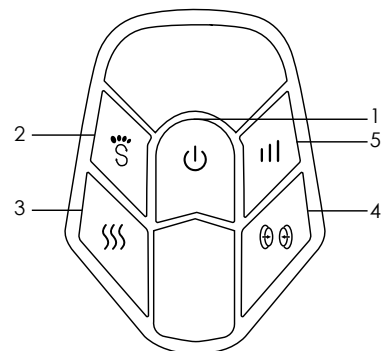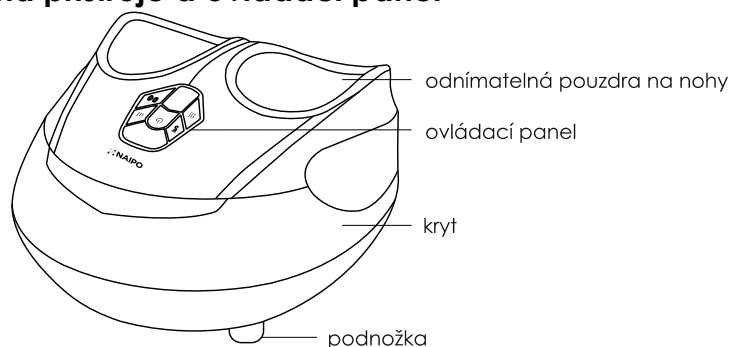

1. Vypínač: Stiskem tohoto tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete. Po připojení přístroje ke zdroji napájení bude blikat bílá kontrolka. Po jednom stisku tlačítka se bílá kontrolka rozsvítí a signalizuje, že se přístroj nachází v pohotovostním režimu.
2. Tlačítko valivé masáže: Stiskem tohoto tlačítka se automaticky zapnou funkce zahřívání, valivá masáž a masáž stlačeným vzduchem. Funkce zahřívání a masáž stlačeným vzduchem lze ovládat samostatně.
3. Tlačítko zahřívání: Stiskem tohoto tlačítka ovládáte funkci zahřívání. Když je přístroj zapnutý, je výchozí teplota zahřívání nastavena na 45 °C, což je signalizováno červenou kontrolkou. Je-li pro vás teplota příliš vysoká, stiskněte toto tlačítko znovu. Je-li rozsvícena bílá kontrolka, bude teplota zahřívání 40 °C.
4. Tlačítko ovládání vzduchových polštářů: Tímto tlačítkem zapínáte a vypínáte nezávislou masáž pomocí vzduchových polštářů.
5. Tlačítko úpravy intenzity: Tímto tlačítkem upravujete tři úrovně intenzity masáže pomocí vzduchových polštářů (bílá kontrolka = nízká / modrá = střední / červená = vysoká). Když je přístroj zapnutý, je výchozí intenzita nízká. Pokud vzduchové polštáře vypnete, toto tlačítko se podle toho zachová automaticky.

## Údržba výrobku

- Před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě.
- Čistěte pouze měkkou a mírně vlhkou houbou.
- Po použití přístroj odpojte od zdroje napájení a uložte jej na suchém a dobře větraném místě.

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Přístroj nepracuje, přestože byl připojen ke zdroji elektrického proudu.	Zkontrolujte, zda je přístroj propojený s napájecím adaptérem.
	Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně zasazen do zásuvky.
	Po delší době činnosti se mohou přístroj a jeho motor přehřát. Přístroj se poté z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Odpojte jej od elektřiny a vyčkejte 30–50 minut, než zchladne.
Výrobek během činnosti přestal pracovat.	Pokud došlo k zapnutí časovače a čas vypršel, nastartujte přístroj znovu.
	Odpojte přístroj od elektřiny, znovu jej zapojte a pak nastartujte.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>  
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.  
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika  
Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)